

TRIN 01

Kabinens temperatur

KABINE**20–25 °C**

Ikke varm.

VARMEPLADE**100 °C**

ikke under sprøjt


Kabinens temperatur er 20–25 °C. Den varmes ikke.

Varmepladen på 100 °C bruges først, når glasset er sprøjtet og lagt derover. Der sprøjtes ikke hen over den.

Ethanol i en varm kabine er en brandrisiko.

TRIN 02

Spild ikke dråberne

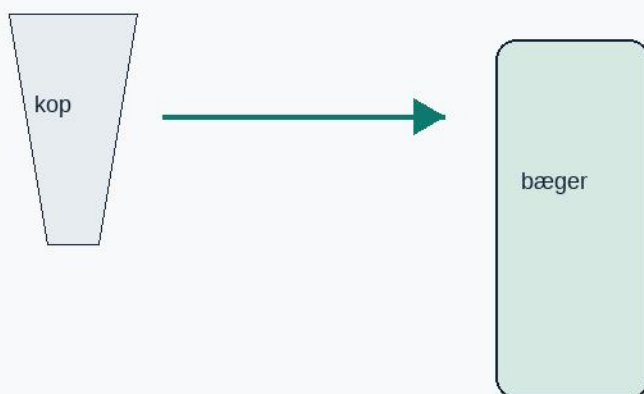

Tilbage i bægeret. Ikke ud i luften.

Hæld det, der er tilbage i koppen, tilbage i bægeret.

Testen køres med det billige opløsningsmiddel. Ikke med MeO-2PACz, perovskit, sølv eller grafenoxid.

Samme tryk, samme afstand og samme træk i aftrækkeren som ved den rigtige sprøjt. Skriv de tre tal ned, og ændr dem ikke.

TRIN 03

Hvor meget der lander

1 Vej

rent glas

2 Ét træk

billig væske

3 Vej igen

med det samme

Forskel = våd mængde på glasset

Vej et rent 50 × 50 mm glas. Skriv tallet.

Ét jævnt træk over glasset. Vej det igen med det samme, før væsken er fordampet.

Forskellen er den våde mængde pr. passage. Gør det fem gange, og brug gennemsnittet. En 10-sekunders sprøjt ned i et bæger viser, hvad sprøjten giver i alt. Det tal er større, fordi en del rammer ved siden af.

TRIN 04

Hvilken væske

Lag	Test med
MeO-2PACz	ethanol
Perovskit	DMF:DMSO 4:1, uden salt
SnO ₂	vand
Sølv	væsken på flasken
Grafenoxid	vand

Hvert lag testes med sit eget opløsningsmiddel. De løber ikke ens.

Perovskittens testvæske er DMF og DMSO i forholdet 4:1, uden SnI₂, FAI, SnF₂ og EDAI₂.

Den rigtige blanding er lidt tykkere, så den lander en smule mindre. Det er tæt nok, når dråberne ikke må spildes.

TRIN 05

Rengøring

- 1 Hæld tilbage
- 2 Skyl med lagets væske
- 3 Skyl med ethanol
- 4 Blæs tør

Perovskit: DMF først. Ikke vand. Ikke acetone.

Tøm koppen tilbage i bægeret, før noget tørrer.

Skyl med det opløsningsmiddel, laget blev blandet i, indtil strålen er klar. Skyl derefter med ethanol, og blæs luft igennem, til dysen er tør.

Perovskit skylles med DMF først. Vand får saltene til at størkne i dysen. Acetone kan ødelægge pakningerne. Sidder der noget fast, lægges kun nål og dyse i DMF, ikke hele airbrushen.